



# Mano Médical

Medical equipment for veterinarians

CATALOGUE  
**2024**



Votre partenaire matériel  
*Depuis 25 ans à vos côtés*

● [www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)



Chers Clients, Chers Partenaires,

Nous vous présentons l'édition 2024 de notre catalogue qui contient à la fois des **produits historiques de nos gammes et des nouveautés** importantes afin de satisfaire vos besoins, quelle que soit votre pratique quotidienne.

Dans chacune des familles que nous vous proposons, nous souhaitons vous apporter des **solutions de qualité, fiables et adaptées.**

Au-delà des produits eux-mêmes, nous veillons à **vous apporter supports, conseils et services** (y compris financiers) au travers de l'ensemble de nos équipes commerciales, techniques et administratives. N'hésitez pas à nous solliciter, vous trouverez dans les pages suivantes les coordonnées de vos interlocuteurs.

Toute l'équipe Mano Médical vous souhaite une bonne lecture et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Merci pour votre confiance !

**Denis CATINAUD, DVM**

Directeur Qualité & Marketing

# TOUTE UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE !

## VOS RESPONSABLES DE SECTEUR

Relations groupements partenaires, centrales et laboratoires pharmaceutiques vétérinaires :

Laurence ELSSENHORN

Directrice des ventes France & export  
welcome@manomedical.com

07 85 43 40 93



Benjamin GATHEN

b.gathen@manomedical.com

07 85 11 94 12



Julien GLOAGUEN

j.gloaguen@manomedical.com

06 14 10 08 23



Anthony DISCOURS

a.discours@manomedical.com

06 37 44 30 93



Brahim BELGHELIEM

b.belgheliem@manomedical.com

06 77 33 41 59



Laurent RECOLIN

l.recolin@manomedical.com



06 27 61 65 45



Fabien CHAUBARD

f.chaubard@manomedical.com

06 33 89 14 43

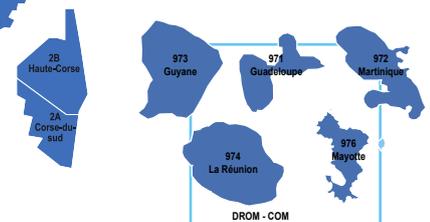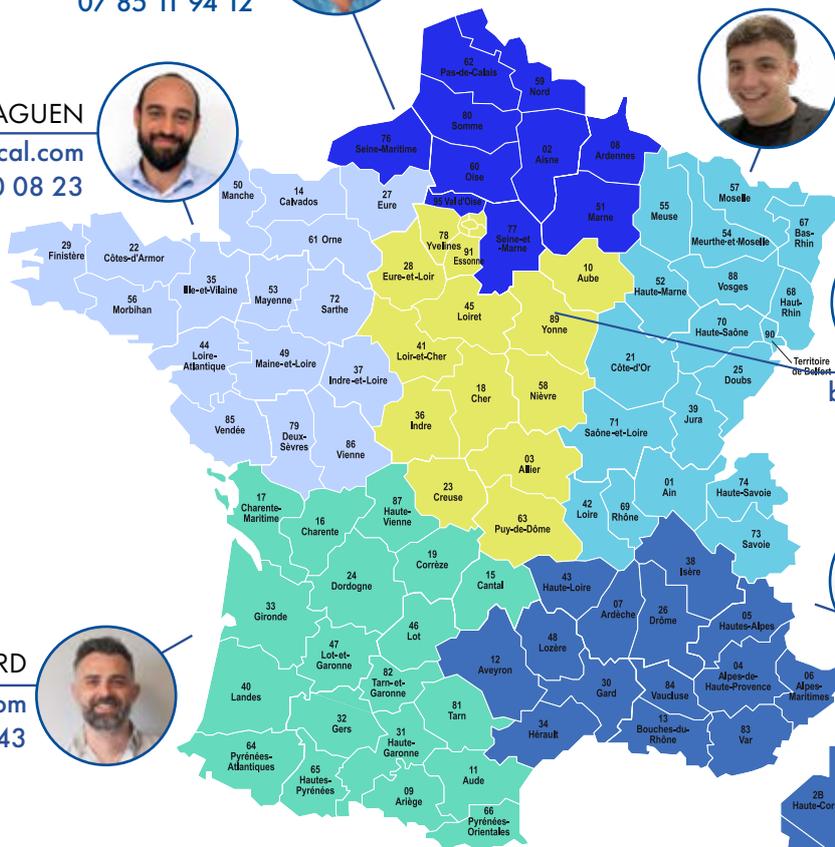

## VOTRE SERVICE CLIENT

02 96 85 86 76



Informations tarifaires, suivi de vos commandes, dossiers de financement :

Christine HUBER

c.huber@manomedical.com

Camille REVEL

c.revel@manomedical.com

Patricia HÉRON

p.heron@manomedical.com

Assistance technique, pièces détachées, réparations :

Patrick BOURMAULT

tech@manomedical.com

Julien MARTIN


j.martin@manomedical.com

Mickaël JACQUES

m.jacques@manomedical.com



# MANO MÉDICAL À TRAVERS LE MONDE

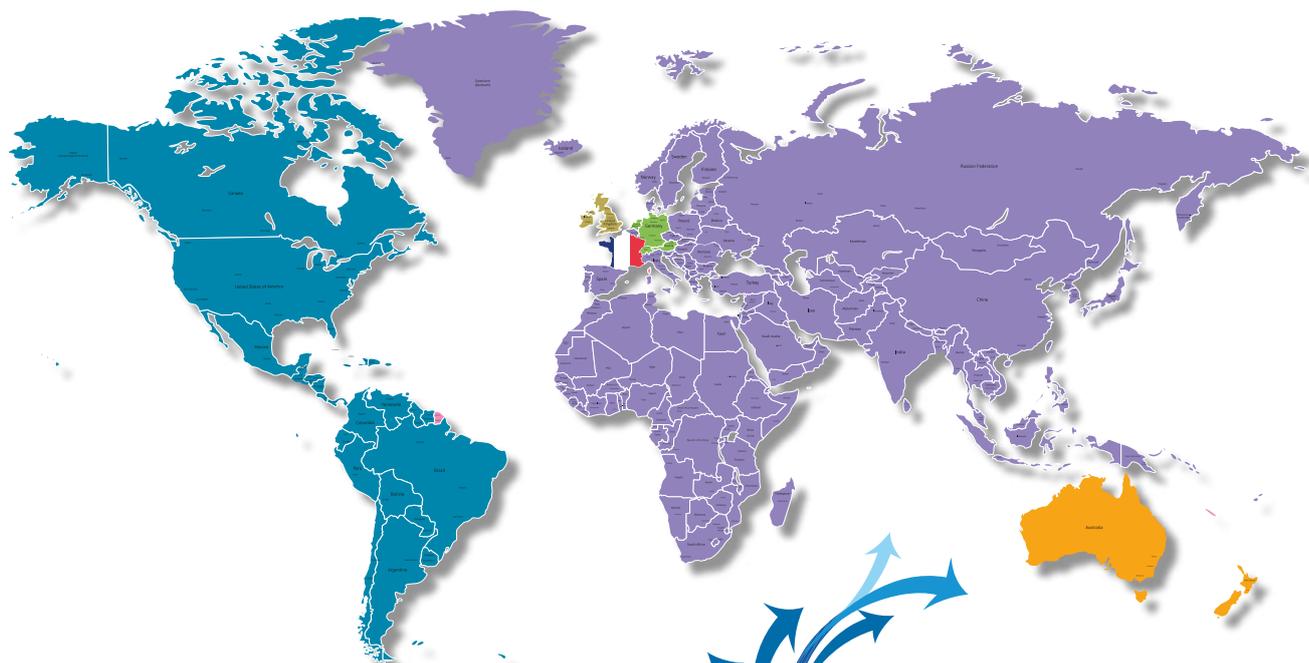

## EUROPE - ASIE - AFRIQUE

À l'exception de l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, Les Pays-Bas, le Royaume Uni et la Rép. d'Irlande

Cyril DRAULT  
c.drault@manomedical.com  
+33 (0)6 37 15 73 34



Mano  
Médical  
by **génia**

## ALLEMAGNE, SUISSE, AUTRICHE et PAYS-BAS

Paola MANGONE / Groupe Génia  
p.mangone@genia.fr  
+49 (0)173 349 58 17



## ROYAUME UNI et RÉPUBLIQUE D'IRLANDE

Katherine HUGHES / Groupe Génia  
k.hughes@genia.fr  
+44 (0)776 856 9918



## AMÉRIQUES

Génia USA  
contact@geniausa.com

## OCÉANIE

Génia AUSTRALIA  
contact@geniaaustralia.com



# SOMMAIRE



## IMAGERIE..... 6

- Échographie..... 7
- Endoscopie ..... 13
- Radiologie ..... 16



## CHIRURGIE..... 22

- Actes chirurgicaux / Anesthésie ..... 23
- Bistouris..... 24
- T.O.M.™ **Innovation mondiale / Exclusivité Mano Médical**..... 26



## DIAGNOSTIC – MONITORING..... 28

- Diagnostic (Doppler, PetMAP™, ECG, Microscopes) ..... 29
- Moniteurs multi-paramétriques..... 34



## SOINS ET BIEN ÊTRE..... 37

- Thérapie laser ..... 38
- Dentisterie ..... 40
- Fluidothérapie ..... 41
- Matelas chauffants ..... 42



## AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS..... 43

- Nettoyage, stérilisation et désinfection ..... 44
- Éclairage..... 47
- Tables de consultation, tables de chirurgie ..... 48

## SERVICES / INDEX..... 50



# • Imagerie



## ÉCHOGRAPHIE ULTRA-PORTABLE



### PocketScan



Idéal pour une utilisation mobile ou comme échographe d'appoint en salle de consultation

- 2 sondes ( micro convexe et linéaire )
- Connexion sans fil
- Totalement autonome
- Imagerie optimisée
- Ultra léger
- Facile à transporter
- 250g / 156 x 80 x 20 mm



## ÉCHOGRAPHIE RURALE ET ÉQUINE

### CTS800

Adapté à la gynécologie bovine et équine

- Livré avec une sonde endo-rectale longue ( 15 cm ) ( de 4 à 6,2 MHz )
- Seulement **800 grammes** ! ( 225x128x45 mm )



Profitez de nos supports pédagogiques présentés par des vétérinaires spécialistes.  
Consultez nos vidéos de présentation et nos webconférences.





## ÉCHOGRAPHE POLYVALENT Apogee 1000V Lite

### Performant et compact

- Technologie MFI (image haute définition)
- Compact et léger (5 kg)
- Écran de 15'' haute résolution
- Batterie amovible avec chargeur de voiture
- Panneau de commande plat résistant
- Sac de transport à 4 roulettes pour une meilleure mobilité



## DOPPLER COULEUR DYNAMIQUE

### Sonoscape E3V

- Doppler couleur, pulsé et continu
- Moniteur HD 15,6'' anti-reflet et inclinable
  - Clavier rétro-éclairé
  - 2 connecteurs sondes
- Autonomie batterie de 1h30



Nos échographes portables disposent d'un chariot support en option

NEW!

## ÉCHOGRAPHE TABLETTE

### Piloter Vet



Un concentré d'innovations pour de nombreuses possibilités d'utilisation !

- Écran tactile HD 13,3" (33,25 cm)
- Rotation horizontale / verticale
- Léger : 1,9 kg seulement
- Poignée intégrée
- Tous dopplers
- Connecteur 3 sondes *disponible en option*



Connecteur 3 sondes



## ÉCHOGRAPHIE EN CLINIQUE

### Sonoscape P20

**POLYVALENT  
AVEC UNE TRÈS  
BONNE QUALITÉ  
D'IMAGE**



#### Ergonomie :

- Écran HD LED 21,5''
- Clavier tactile HD 13,3'' anti-reflet
- Hauteur réglable, bras pivotant
- Batterie grande capacité
- 4 connecteurs sondes

#### Modes d'imagerie :

- Tous dopplers : couleur, puissance, pulsé, continu et tissulaire
- Mesures automatisées (IMT, EF, tracé)
- Optimisation de la résolution de contraste
- Coloration dynamique
- Auto optimisation

#### Gestion des données patients :

- Rapport et archivage des images par examen
- Prévisualisation des images
- Sélection et envoi des images dans de nombreux formats (BMP, JPG, TIFF, AVI, PDF)



NEW!



## ÉCHOGRAPHIE EN CLINIQUE Sonoscape *Propet 70*

**Véritable interface vétérinaire !**

**Fonctionnalités premium pour un diagnostic optimal :**

- Préréglages vétérinaires pour toutes les sondes
- Annotations vétérinaires
- Fiche patient vétérinaire
- Affichage grand angle sans altération de l'image
- Gamme complète de sondes pour animaux de toutes tailles

▼  
**SONDE  
CARDIOLOGIE  
HAUTE FRÉQUENCE  
POUR PETITS  
ANIMAUX**

**Une qualité d'image  
exceptionnelle et  
une ergonomie  
ultra optimisée  
à découvrir  
en vidéo !**



+

### Les atouts du Sonoscape Propet 70

- ▶ Moniteur HD, écran tactile
- ▶ Disque dur 1To
- ▶ Gel d'image
- ▶ Optimisation du contraste
- ▶ Réduction du bruit
- ▶ Détection des contours
- ▶ Technologie doppler améliorée
- ▶ 5 connecteurs sondes




## CHOISISSEZ VOTRE MATÉRIEL EN UN CLIN D'OEIL !

	Utilisation	Abdo	Cardio	Sondes*
Sonoscape Propet 70		★★★★★	★★★★★	Convexe Micro-convexe Linéaire large empreinte Linéaire petite empreinte Cardio Basse fréquence Cardio Haute Fréquence
Sonoscape P20		★★★★	★★★	Convexe Micro-convexe Linéaire large empreinte Linéaire petite empreinte Cardio Basse fréquence Cardio Haute Fréquence
Piloter Vet		★★★	★★	Micro-convexe Linéaire Convexe Endo-rectale Cardiologie
Apogee 1000V lite		★★	★	Micro-convexe Linéaire Cardio Basse Fréquence Cardio Haute Fréquence Endo-rectale
Sonoscape E3V		★★★	★★	Micro-convexe Linéaire Cardio Basse Fréquence Cardio Haute Fréquence Endo-rectale Convexe
PocketScan		★	-	Linéaire Convexe
CTS 800		★	-	Endo-rectale courte Endo-rectale longue

\* détail des sondes fourni sur demande

### LES SONDES DISPONIBLES AVEC NOS APPAREILS

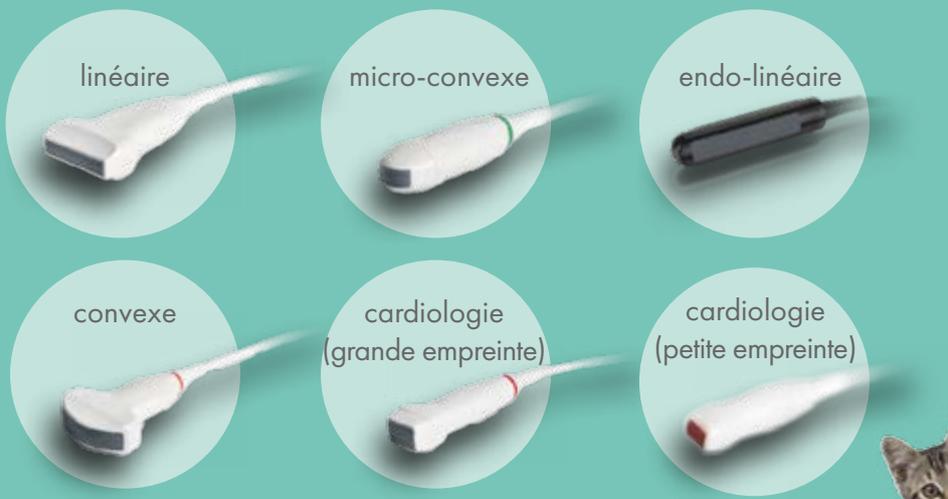


## ENDOSCOPES RIGIDES

# ManoScope

Outils diagnostiques polyvalents pour chiens, chats et NAC

UTILISABLE  
POUR  
FACILITER  
L'INTUBATION

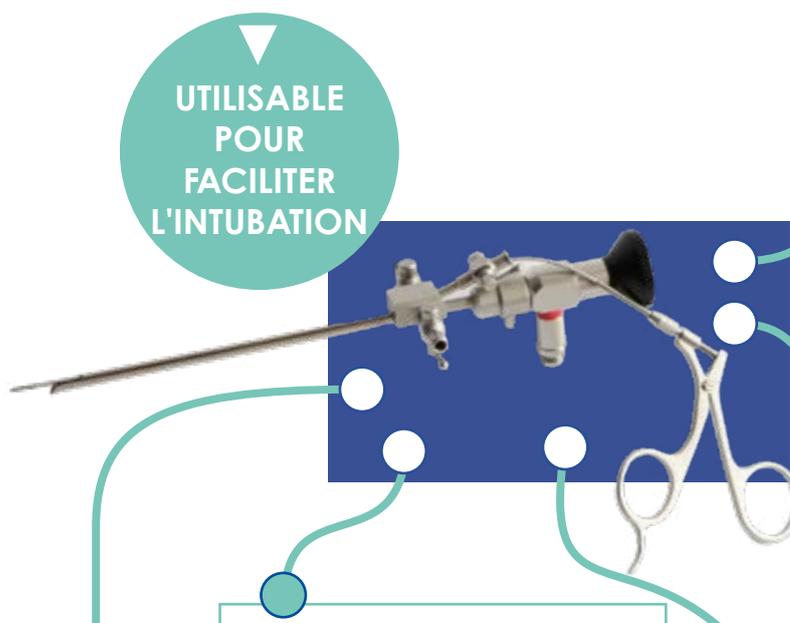

### OTOSCOPE

- Longueur : 85 mm
- Diamètre extérieur : 5 mm
- Canal de travail : 1,67 mm
- Angle de vue : 0°

### OTOSCOPE

- Longueur : 108 mm
- Diamètre extérieur : 2,7 mm
- Canal de travail : 1,67 mm
- Angle de vue : 0° ou 30°

### RHINOSCOPE

- Longueur : 175 mm
- Diamètre extérieur : 2,7 mm
- Canal de travail : 1,67 mm
- Angle de vue : 30°

### ARTHROSCOPE

- Longueur : 175 mm
- Diamètre extérieur : 2,7 mm
- Canal de travail : 1,67 mm
- Angle de vue : 0° ou 30°



### Caméra avec coupleur et processeur

Nombreux réglages : arrêt sur image, balance des blancs automatique, orientation image, zoom...



Liste des pinces et accessoires, consultez-nous au  
**02 96 85 86 76.**



# COLONNE D'ENDOSCOPIE HDScope




**NEW!**

GAMME DE  
CLINIQUE

**IMAGE DE TRÈS HAUTE QUALITÉ**  
Capteurs CMOS, écran Full HD 21,5"

**COMMANDES INTÉGRÉES**  
Balance des blancs / image figée / aspiration /  
irrigation / insufflation

**VISION PANORAMIQUE**  
Profondeur de champ jusqu'à 100 mm

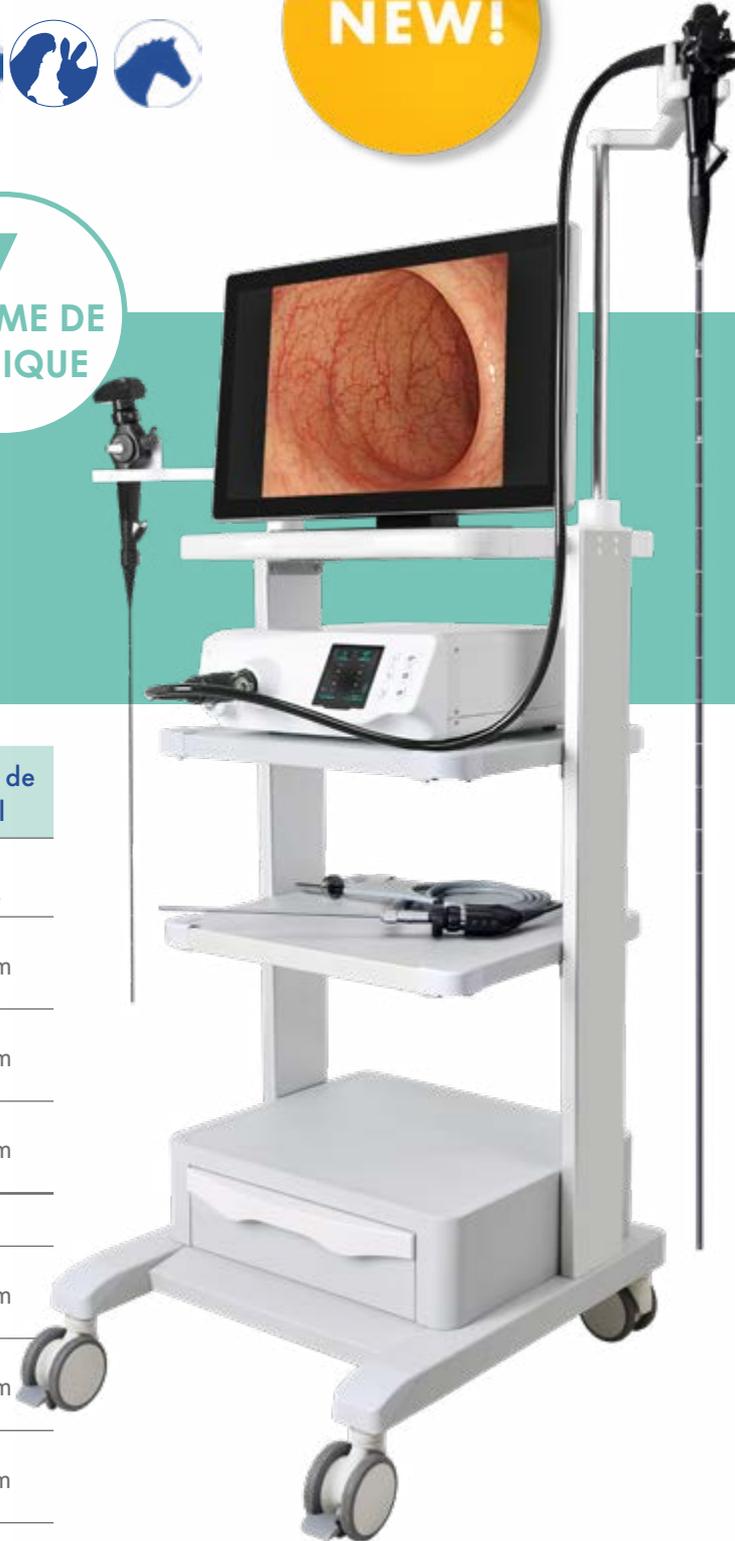

Modèle	Longueur	Ø extérieur	Ø canal de travail
--------	----------	-------------	--------------------

**Gastroscope**

Connexion à la pompe air/eau de la source lumineuse

HDScope 3000 / 9.2 / 2.8	3 000 mm	9.2 mm	2.8 mm
-----------------------------	----------	--------	--------

HDScope 1500 / 9.2 / 2.8	1 500 mm	9.2 mm	2.8 mm
-----------------------------	----------	--------	--------

HDScope 1500 / 6.8 / 2.2	1 500 mm	6.8 mm	2.2 mm
-----------------------------	----------	--------	--------

**Bronchoscope**

HDScope 1500 / 5.8 / 2.8	1 500 mm	5.8 mm	2.8 mm
-----------------------------	----------	--------	--------

HDScope 1000 / 4.8 / 2.0	1 000 mm	4.8 mm	2.0 mm
-----------------------------	----------	--------	--------

HDScope 1500 / 6.8 / 2.2	610 mm	2.8 mm	1.2 mm
-----------------------------	--------	--------	--------



**HDSCOPE CAMÉRA AVEC COUPLEUR**  
**POUR CONNEXION ENDOSCOPIE RIGIDE**  
disponible en option

Liste des pinces et accessoires,  
consultez-nous au **02 96 85 86 76**.



## ENDOSCOPES PORTABLES HDScope Lite



GAMME  
PORTABLE



**Endoscopes extra-fins**

*Pour des examens y compris sur les tout-petits*

Modèle	Longueur	Ø extérieur	Ø canal de travail
HDScope Lite 1500 / 5,8 / 2.8	1 500 mm	5.8 mm	2.8 mm
HDScope 1000 / 4.8 / 2.0	1 000 mm	4.8 mm	2.0 mm
HDScope 600 / 2.8 / 1.2	600 mm	2.8 mm	1.2 mm

Interface : Écran processeur 4" ou 10" sur batterie



Pour une gestion optimale de votre matériel

- Manipulation
- Entretien
- Stockage



Demandez **notre guide pratique**  
au 02 96 85 86 76.



Kart disponible en option



Tous nos générateurs de rayons X sont **certifiés CE Médical 93/42**  
La certification **CE médical** ou **NF74100** est obligatoire pour pouvoir utiliser votre générateur.

## GÉNÉRATEURS DE RAYONS X PORTABLES

### HF 1060

- Générateur haute fréquence
- Déclencheur manuel
- Pointeur double laser pour une gestion facile de la distance focale
- Manipulation aisée avec une excellente qualité d'image
- Livré dans une valise rigide
- 12,9 kg



### Poskom 20BT Lite

- Générateur haute fréquence
- Fonctionne sur secteur ou sur batterie
- Grande autonomie batterie : jusqu'à 650 tirs sans recharge
- Pointeur double laser pour une gestion facile de la distance focale
- Livré dans une valise rigide en aluminium renforcée et protection interne en mousse
- 7,2 kg



Le saviez-vous ?



Connaissez-vous la réglementation en matière de générateur de rayons X ?  
Consultez notre rubrique "Le Saviez-vous" sur [www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)

## TABLE DE RAYONS X Mano RX32

- Compatible film et numérique (CR et DR)
- Puissance : 32 kW
- Fréquence : 100 kHz
- Double foyer anodes tournantes :  
0,6 mm et 1,3 mm
- Écran tactile incluant un clavier pour  
enregistrement des valeurs
- Programmation anatomique vétérinaire  
modifiable
- Plateau flottant 4 directions  
1500\* 745 mm (hauteur 775 mm)
- Alimentation standard  
220 V monophasée



### Solution bidirectionnelle :

Programmez vos constantes depuis votre PC  
d'acquisition grâce au logiciel **ManoVet 2.0**

### BESOIN D'UNE SOLUTION DE FINANCEMENT ?

Contactez-nous au 02 96 85 86 76 pour une étude personnalisée.



## CAPTEUR PLAN ÉQUIN DR Imaging WIFI



- Résistant aux chocs grâce à sa coque aluminium et sa protection en caoutchouc rigide
- Fonctionnement sur batterie longue durée
- Facile à manier grâce à sa poignée et à sa taille adaptée (333 x 282 x 15 mm, 2,8 kg )
- Mobilité totale grâce au WiFi
- Ordinateur portable puissant doté d'un écran haute résolution



### SIMPLIFIEZ VOS VISITES D'ACHAT !

Mesures, identification, orientation et calibration **AUTOMATIQUES** des images  
**EN UN SIMPLE CLIC**, partagez un rapport et une sélection d'images



### LOGICIEL MÉTRON

Avec l'aide de l'intelligence artificielle,  
disposez des fonctionnalités essentielles  
pour gérer les images

- Gestion simple et intuitive de la base de données
- Comparaison facile d'images pour un suivi simplifié
- Gestion des photos, des vidéos et des rapports PDF
- Export automatique d'images en DICOM ou en JPG
- Multiples annotations équinnes disponibles

- Création facile de rapports intégrant radiographies et photos
- Différentes méthodes de calibration disponibles
- Affichage et impression en taille réelle
- Partage web instantané des images avec le propriétaire



## CAPTEUR PLAN DR Series



- Capteur Plan silicium CE Médical CSI
- Image très haute résolution
- S'utilise avec n'importe quel générateur de rayons X
- S'intègre facilement dans le tiroir cassette de votre table Rx

**NEW!**



- Traitement des images ultra-rapide : 1 s entre l'acquisition et l'affichage de l'image sur le logiciel (2-3s en WiFi)
- Résolution HD (99  $\mu\text{m}$ ) disponible pour le capteur format 43x43
- Capteur WiFi : fonctionnement jusqu'à 14h sur batterie
- Coque externe solide en carbone, polycarbonate et ABS



Mano DR 940



Mano DR 942

Mano DR 941


Modèle	Format	Connectivité	Résolution	Utilisation	Logiciel
Mano DR 940	43x43	Filaire	139 $\mu\text{m}$	Standard canine	ManoVet 2.0
Mano DR 941	35x43	WiFi	139 $\mu\text{m}$	Mixte canine/équine	
Mano DR 942	43x43	Filaire	99 $\mu\text{m}$	Canine HD	



## LOGICIEL INTÉGRÉ ManoVet 2.0

ManoVet 2.0 a été spécialement conçu pour les vétérinaires et s'adapte à tous vos besoins.

- Traitement ultra-rapide des images (3" max.)
- Gestion des données de radioprotection intégrée
- Mesures guidées avancées

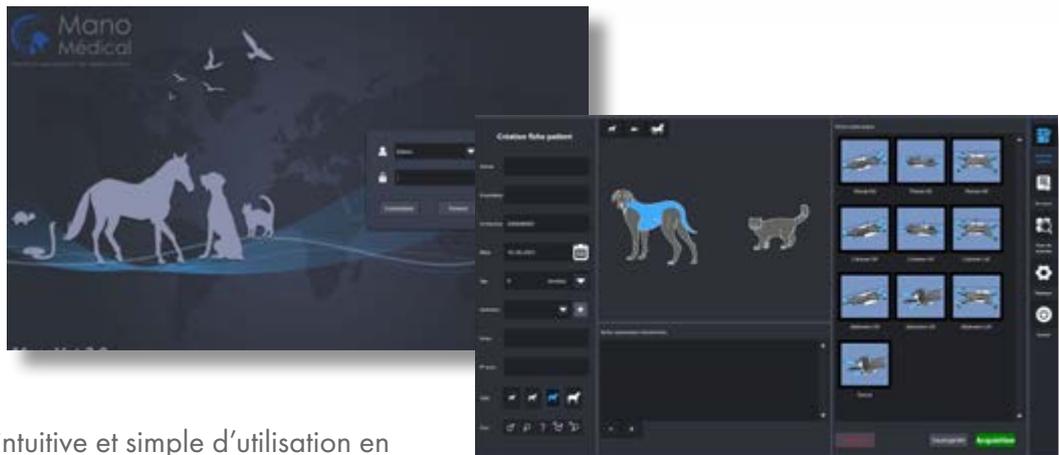

- Interface intuitive et simple d'utilisation en français
- Qualité d'images : Filtres et post-traitements avancés développés spécifiquement pour l'usage sur l'animal
- Parties anatomiques pré-définies
- Possibilité d'ajuster le style d'image en quelques clics
- Parties anatomiques et incidences pour chien, chat, cheval et NAC
- Constantes de radiologie préconisées pour chaque type de cliché et en fonction de la taille de l'animal
- Ajout automatique de demande d'image en fin de protocole : permet de refaire des images directement si elles ne conviennent pas, sans avoir à revenir à la console
- Mesures guidées pour Score Cardio-Vertébral
- Impression Windows ou DICOM
- Partage automatique des images en JPG ou en DICOM sur le réseau de la clinique, permettant de les intégrer dans le dossier patient sur le logiciel de gestion

# ÉCHOGRAPHIE, ENDOSCOPIE, RADIOLOGIE, THÉRAPIE LASER...



## FORMATIONS

Mano Médical,  
le partenaire de  
vos formations



Contactez-nous au  
**02 96 85 86 76**


## WEBINAIRES

Profitez de nos supports techniques  
et pédagogiques présentés par des  
vétérinaires spécialistes.

Abonnez-vous  
à notre chaine !  **YouTube**



# Chirurgie

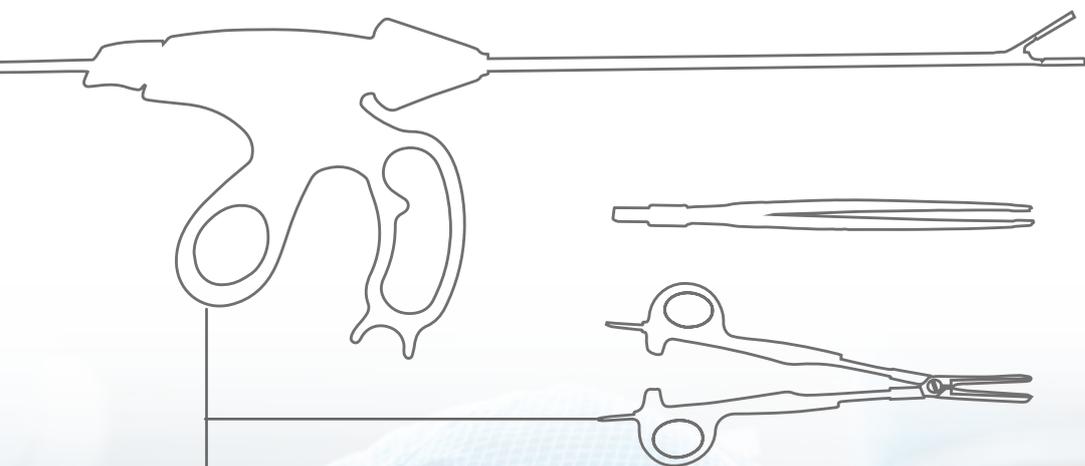

## ASPIRATEUR CHIRURGICAL

### Askir 30

#### Pour un champ opératoire clair et dégagé

- Portable, robuste, simple d'utilisation et facile d'entretien
- Équipé d'un mini compresseur et d'un bocal de récupération de 1L
- Tubulure transparente et flotteur de sécurité pour une meilleure surveillance de l'aspiration



Chirurgie

PRESSION  
ÉLEVÉE :  
1,4 BAR !



## Anesthésie

## CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE

### VetOxyFlow OC1

#### Pression 2 fois plus élevée qu'avec la plupart des concentrateurs du marché !

- Simplicité d'utilisation
- Auto-diagnostic des erreurs
- Encombrement minimum : 49x27x56 cm
- Faible entretien

## DÉTECTEUR D'APNÉE

### apAlert

#### L'original !

Facilite la surveillance du patient sous anesthésie

- Alarme sonore et visuelle
- Affichage du délai entre deux respirations
- Alarme d'apnée et sensibilité ajustable



## LARYNGOSCOPE

#### Set comprenant un laryngoscope et 3 lames droites

- 1 x lame Miller de 75 mm (n°0)
- 1 x lame Miller de 100 mm (n°1)
- 1 x lame Miller de 150 mm (n°2)



## BISTOURIS MONOPOLAIRES ET BIPOLAIRES

### Coag&Cut M120

Conçu pour vos interventions quotidiennes de petites et moyennes chirurgies

Très performant, le bistouri **Coag&Cut M120** dispose de nombreux modes opératoires :

En coupe :

- ▶ CUT = Coupe pure
- ▶ BLEND = Coupe coagulée

En coagulation :

- ▶ FORCED = Coagulation standard rapide et efficace
- ▶ SOFT = Coagulation avec effet en profondeur, sans carbonisation
- ▶ BIPOLAR = Coagulation bipolaire standard



Livré avec :

- Une pièce à main monopolaire porte électrode
- Un set de 10 électrodes + support
- Une plaque neutre et son câble
- Une pince bipolaire droite et son câble
- Une pédale simple

ACCESSOIRES  
COAG&CUT  
AUTOCLAVABLES

### Coag&Cut M200

Bistouri électrique haute performance



200W

Livré avec :


- Une pièce à main monopolaire porte électrode
- Un set de 5 électrodes autoclavables
- Une plaque neutre et son câble
- Une pince bipolaire droite et son câble
- Une pédale double CUT/COAG

#### ▶ 6SENSE Technology

Pour plus de sensibilité

#### ▶ Randomized SPRAY Coag

La véritable coagulation en spray

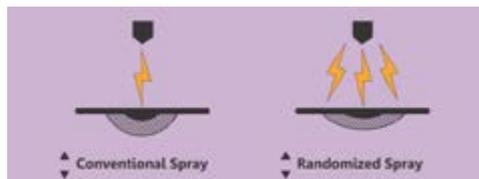

#### ▶ Smart Surgical Assist

Pré-programmation de vos protocoles

#### ▶ Auto diagnostic

Rapide identification des erreurs et solution immédiate

## COUPER, COAGULER, THERMOSOUDER

### Seal & Cut MV1

Adapté à de nombreuses applications chirurgicales

▼  
**BISTOURI  
ÉLECTRIQUE +  
THERMOSUDURE  
TOUT-EN-UN**



Le bistouri **Seal&Cut MV1** convient à tout type de chirurgie ouverte ou laparoscopique telles que : ovariectomie, hystérectomie, splénectomie, chirurgie urologique ...



Chirurgie

### La précision haute technologie associée à votre expertise chirurgicale

- Thermosoudure ultrarésistante des vaisseaux et tissus
- Faible diffusion de chaleur sur les tissus adjacents
- Carbonisation et adhérences réduites
- Activation indépendante de la coupe bipolaire et de la coagulation

▼  
**RÉUTILISABLE /  
AUTOCLAVABLE**

### ► INNOVATION CHIRURGICALE

## Pince Thermosoudure et Coupe 5 mm

- Simple d'utilisation grâce à sa poignée double commande
- Contrôle constant de la diffusion de chaleur
- Précision chirurgicale
- Chirurgie mini-invasive
- Gain de temps
- Peut s'utiliser en laparoscopie comme en chirurgie ouverte



# La révolution chirurgicale 100% française ! **UNE INNOVATION BREVETÉE À L'INTERNATIONAL**


**T.O.M.<sup>TM</sup> | Tripolar-Open-Multifunctional**  
Combine les avantages du monopolaire et du bipolaire **SANS**  
leurs inconvénients !

## **EFFICACITÉ**

- Mode bipolaire
- Nombreuses fonctions de coupes et de coagulations
- Hémostase très efficace
- Préparation chirurgicale simplifiée

## **RENTABILITÉ**

- Un seul outil pour toutes vos chirurgies
- Stérilisation à l'autoclave
- Gain de temps grâce à une gestion optimisée du matériel

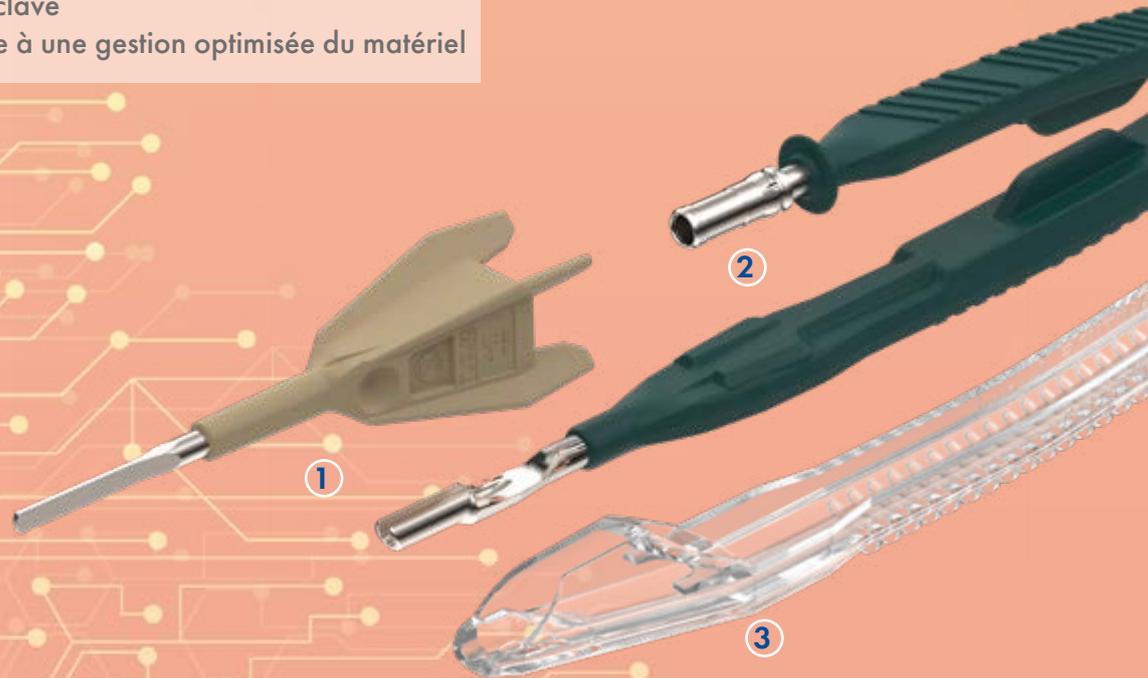

# TOUTE LA CHIRURGIE EN UN TOUR DE MAIN !

Coupe et coagulation des tissus mous à basse tension sans plaque neutre

NEW!

## 1 SEUL INSTRUMENT POUR TOUTES VOS CHIRURGIES

### ÉLECTRODE T.O.M.™ ①

Pivote aisément à l'aide d'1 seul doigt pour s'adapter à tous les gestes chirurgicaux

### PIÈCE À MAIN BIPOLAIRE STÉRILISABLE T.O.M.™ ②

### EXTRA T.O.M.™ ③

Aspiration des fumées chirurgicales et/ou d'irrigation des tissus



### SÉCURITÉ MAXIMALE POUR LE PRATICIEN ET LE PATIENT

- Lame pour coupe et coagulation
- Fonctionnement à très basse tension
- Profondeur de coupe constante
- Aucun risque de brûlures de plaque sur le patient
- Aspiration des fumées sur le site de production (Extra T.O.M.™)

### DURABILITÉ

- Plus besoin de plaque neutre ni d'accessoires spécifiques
- Pièce à main T.O.M.™ autoclavable
- Emballages éco-responsables



« Grâce à sa facilité d'utilisation et sa sécurité, T.O.M.™ évite les problèmes de contact avec la plaque neutre et permet une uniformisation de son utilisation d'un animal à l'autre.

La section est d'une grande efficacité et la dissection des tissus est aisée».  
Dr Pierre DANIEL - CLINIQUE VÉTÉRINAIRE BROCELIANDE - ST MALO



Générateur et aspirateur de fumées sur kart

# Monitoring Diagnostic



## MICROSCOPES

### VetScience



#### MICROSCOPE BINOCULAIRE

##### B 01

###### QUALITÉ PROFESSIONNELLE À PRIX RAISONNABLE

- Plans achromatiques (4x/ 10x/ 40x et 100x)
- Oculaire : Grand champ 10X / 18 mm
- Lampe LED 3W, intensité lumineuse réglable



Monitoring  
Diagnostic



#### MICROSCOPE BINOCULAIRE

##### B 02

###### QUALITÉ ET CONFORT

- Plans achromatiques infinis (4x/ 10x/ 40x et 100x)
- Oculaire : Grand champ 10x, 20 mm
- Lampe LED 3W, intensité lumineuse réglable et mise au point facilitée



## MICROSCOPE TRINOCULAIRE

### T 03

#### ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME POUR USAGE INTENSIF

- Plans achromatiques infinis (4x/ 10x/ 40x et 100x)
- Oculaire : Grand champ 10 x 20 mm
- Lampe LED 3W, intensité lumineuse réglable et mise au point
- Mise au point précise (par palier de 1µm)
- Caméra et tablette disponibles en option



Monitoring  
Diagnostic

## OPTIONS DU MICROSCOPE T03

### CAMÉRA À MONTURE C

- Caméra avec connexion USB 2.0 - 10 MP CMOS
- Logiciel avec de nombreux réglages



### TABLETTE

- Tablette Android comprenant un écran de 9,7"
- Caméra 5MP intégrée
- Logiciel avec de nombreux réglages



## ÉLECTROCARDIOGRAPHE

# Vet ECG-VE 300/3 pistes

Indispensable pour de la cardiologie plus poussée



- Affichage simultané de 3 dérivations
- En mode automatique, impression et enregistrement simultanés de 7 dérivations
- Fonctionne sur secteur ou batterie rechargeable
- Filtrage numérique des interférences
- Mode manuel ou automatique
- Paramètres configurables

## DOPPLER VÉTÉRINAIRE ●

Vet BP

### Mesure de la pression artérielle, monitoring, «auscultation» des petits animaux

CONÇU PAR  
MANO  
MÉDICAL


#### 3 sondes au choix :

- Sonde pression artérielle ①
- Sonde stylo pour auscultation des NAC de petite taille ②
- Sonde œsophagienne pour monitoring ③

Livré avec 4 brassards de différentes tailles



Monitoring  
Diagnostic

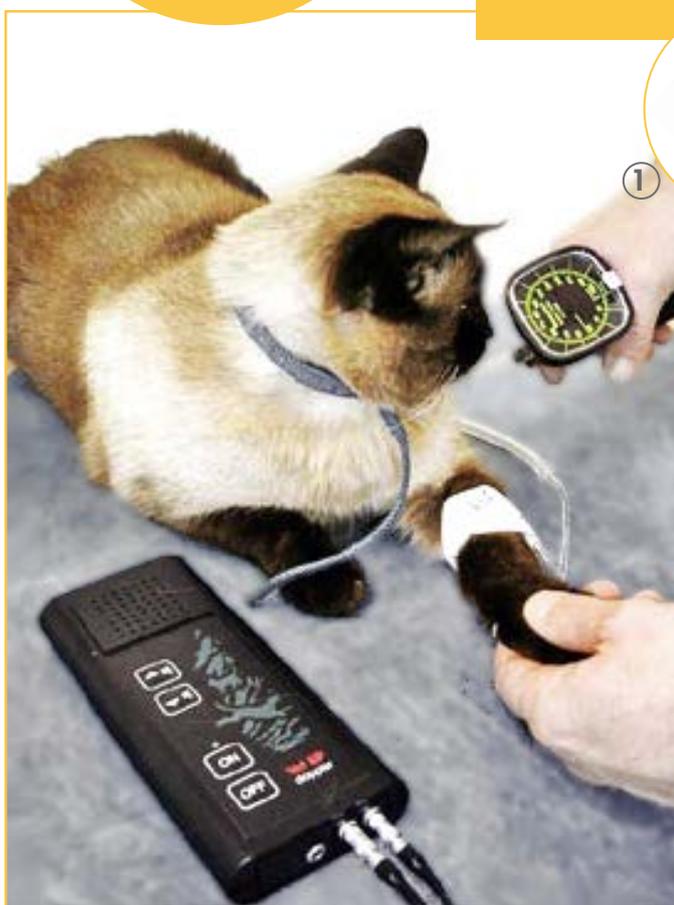

#### Monitoring avec le Doppler :

En utilisant la sonde œsophagienne durant une anesthésie ou en réanimation, le vétérinaire bénéficiera en permanence d'un signal sonore reflétant la circulation sanguine et l'activité cardiaque.

#### Mesure de la pression artérielle lors d'une perfusion :

La pression artérielle peut être un indicateur significatif de la situation d'un animal préalablement à une perfusion. Elle permet donc d'adapter cette dernière.



## • TENSIOMÈTRE

### PetMAP™

## La solution de référence

Conçue pour un diagnostic de l'hypertension et de l'hypotension  
Facile, rapide et efficace !

### PetMAP™ graphic 2

- Pression artérielle systolique et diastolique
- Pression artérielle moyenne (MAP)
- Fréquence cardiaque



Monitoring  
Diagnostic

### PetMAP™ g3

- Pression artérielle systolique et diastolique
- Pression artérielle moyenne (MAP)
- Fréquence cardiaque
- Température



### PetMAP™ +II

- Pression artérielle systolique et diastolique
- Pression artérielle moyenne (MAP)
- Fréquence cardiaque
- Température
- ECG (module optionnel)
- Capnographie (module optionnel)



### PetMAP™ +II SpO<sub>2</sub>

- Pression artérielle systolique et diastolique
- Pression artérielle moyenne (MAP)
- Fréquence cardiaque
- Température
- Oxymétrie de pouls (modèle petMAP™ +II SPO<sub>2</sub>)
- ECG (module optionnel)
- Capnographie (module optionnel)



Tous les PetMAP™ sont livrés avec 7 brassards de tailles différentes (2 - 2,5 3 - 3,5 - 4 - 4,5 et 5,5 cm)

En option :

- Brassards grandes tailles : 6,5 - 8 - 10 et 13 cm
- Housse de protection
- Fixations pour table et pied à perfusion

## CHOISISSEZ VOTRE MATÉRIEL EN UN CLIN D'OEIL !

	PetMAP™ graphic II	PetMAP™ g3	PetMAP™+ II	PetMAP™ + II SpO <sub>2</sub>
Paramètres mesurés	Pression artérielle (systolique, diastolique et moyenne) Fréquence cardiaque	Pression artérielle (systolique, diastolique et moyenne) Fréquence cardiaque Température (sonde vendue séparément)	Pression artérielle (systolique, diastolique et moyenne) Fréquence cardiaque Température ECG (module optionnel) Capnographie (module optionnel)	Pression artérielle (systolique, diastolique et moyenne) Fréquence cardiaque Température Oxymétrie de pouls ECG (module optionnel) Capnographie (module optionnel)
Écran	Écran tactile 4,3" (10,9 cm)	Écran tactile 5" (12,7 cm)		
Gonflage des brassards	Automatique	Automatique et programmable en mode monitoring		
Alimentation	4 piles AA	Chargeur et alimentation secteur inclus		
Accessoires inclus	7 brassards de 2 à 5,5 cm	7 brassards de 2 à 5,5 cm Sonde oesophagienne de température	7 brassards de 2 à 5,5 cm Sonde oesophagienne de température 2 capteurs SpO <sub>2</sub> langue et patte	7 brassards de 2 à 5,5 cm Sonde oesophagienne de température 2 capteurs SpO <sub>2</sub> langue et patte



Monitoring  
Diagnostic



### Les options :

- Brassards grandes tailles : 6,5 - 8 - 10 et 13 cm
- Housse de protection
- Fixations pour table et pied à perfusion



Support table



Support pied à perfusion



Housse de protection



## MONITORING MULTIPARAMÉTRIQUE

### VitalSurv MM1 / MM2

**NEW!**

#### Moniteur vétérinaire compact et portable

##### ► VitalSurv MM1

Température, oxymétrie de pouls, pression artérielle et ECG

##### ► VitalSurv MM2

Température, oxymétrie de pouls, pression artérielle, ECG et capnographie

- ECG 3 pistes avec clips (pouls 15-350 bpm)  
*Sondes œsophagiennes adaptables en option*
- Capnographie sidestream (disponible sur le modèle MM2)
- Pression artérielle par méthode oscillométrique
- Température centrale
- Oxymétrie de pouls (pouls 20-300 bpm)
- Contrôle via l'écran tactile ou avec les boutons en façade
- Enregistrement des données patient



- Grand écran tactile 30 cm (12")
- Fonctionnement sur batterie pour monitoring post-chirurgical
- Ergonomique (5 kg, 9 cm d'épaisseur seulement !)
- Possibilité de connecter un clavier et une souris USB
- Capnographie avec piège à humidité longue durée de vie



Monitoring  
Diagnostic



## CAPNOGRAPHE

### Capno 5

- Courbes CO<sub>2</sub> en temps réel
- Valeurs ET<sub>CO</sub><sub>2</sub>
- Valeurs Fi<sub>CO</sub><sub>2</sub>
- Fréquence respiratoire
- Alarmes apnée visuelles et sonores
- Support pour table inclus

## MONITORING MULTIPARAMÉTRIQUE SM 100

Une technologie spécialement développée pour l'usage vétérinaire !

Le moniteur VetSpecs® SM100 permet le contrôle des paramètres vitaux lors d'interventions chirurgicales ainsi que la gestion de la qualité de votre anesthésie gazeuse.



### Les paramètres :

- Capnographie Sidestream Micro-flux™
- Pression artérielle non invasive par méthode pléthysmographique fonctionnelle sur toutes les tailles d'animaux de 2 à 60 kg
- Oxymétrie de Pouls : 2 capteurs
  - 1 capteur langue
  - 1 capteur patte et coussinets permettant l'utilisation en dentisterie et une plus grande stabilité de signal (sauf peau foncée)
- ECG avec sondes œsophagiennes ou clips
- Température centrale par sonde œsophagienne



Monitoring  
Diagnostic

## PM 10B

- Capnographie Sidestream Micro-flux™
- Oxymétrie de Pouls
- ECG avec sondes œsophagiennes ou clips
- Température centrale par sonde œsophagienne



Nos moniteurs et capnographes sont livrés avec les sondes et capteurs spécialement conçus pour l'usage sur l'animal.



2 Capteurs SpO<sub>2</sub>  
langue et patte



3 pinces ECG  
atraumatiques



2 Sondes œsophagiennes  
chien / chat



## CHOISISSEZ VOTRE MATÉRIEL EN UN CLIN D'OEIL !



	Température	Oxymétrie de pouls	Pression artérielle	Capnographie	ECG	Les + produits
Capno 5				✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucun fil : juste un capteur et un écran</li> <li>Pas de réglage nécessaire</li> <li>Affichage des données instantané</li> <li>Possibilité de le connecter aux moniteurs SM100 et PM10B</li> </ul>
PetMAP+ II	✓		✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>Appareil d'appoint très simple d'utilisation</li> <li>Écran tactile 12,7 cm (5")</li> <li>Fonctionne sur batterie longue durée</li> <li>Capteurs et sondes conçus pour usage sur l'animal</li> </ul>
PetMAP+ II SPO <sub>2</sub>	✓	✓	✓			<ul style="list-style-type: none"> <li>Appareil d'appoint très simple d'utilisation</li> <li>Écran tactile 12,7 cm (5")</li> <li>Fonctionne sur batterie longue durée</li> <li>Capteurs et sondes conçus pour usage sur l'animal (2 capteurs pour l'oxymétrie de pouls)</li> </ul>
VitalSurv MM1	✓	✓	✓		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile de 30 cm (12")</li> <li>Portabilité maximale grâce à sa poignée et son faible poids (5 kg)</li> <li>Batterie intégrée</li> <li>Adaptateurs sondes œsophagiennes disponibles en option</li> </ul>
VitalSurv MM2	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran tactile de 30 cm (12")</li> <li>Portabilité maximale grâce à sa poignée et son faible poids (5 kg)</li> <li>Batterie intégrée</li> <li>Adaptateurs sondes œsophagiennes disponibles en option</li> <li>Capnographie SideStream avec piège à humidité longue durée de vie</li> </ul>
PM 10 B	✓	✓		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écran de 14,20 cm (5,6")</li> <li>Capteurs et sondes haute sensibilité conçus pour usage sur l'animal</li> <li>Sondes œsophagiennes 3 tailles : NAC (option), chat et chien pour température et ECG</li> <li>Kit ECG pour dentisterie (option)</li> </ul>
SM 100	✓	✓	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grand écran de 26,5 cm (10,5")</li> <li>Capteurs et sondes haute sensibilité conçus pour usage sur l'animal</li> <li>Sondes œsophagiennes 3 tailles : NAC (option), chat et chien pour température et ECG</li> <li>Kit ECG pour dentisterie (option)</li> <li>6 brassards de pression artérielle de 3 à 20cm</li> <li>Possibilité de contrôler la PA en diagnostic</li> </ul>



# • Soins Bien-être



## THÉRAPIE LASER • LaserFlex LT16




MISE À  
JOUR  
GRATUITE !



Soins  
Bien-être

### LES APPLICATIONS COURANTES EN MÉDECINE VÉTÉrinaIRE :

- Réduction de la douleur aigüe (post-traumatique) ou chronique (arthrose...)
- Aide à la cicatrisation de plaies post-chirurgicales ou traumatiques
- Réduction de syndrômes inflammatoires
- Aide à la réparation musculaire et/ou ligamentaire
- Traitement de problèmes gingivaux et dentaires

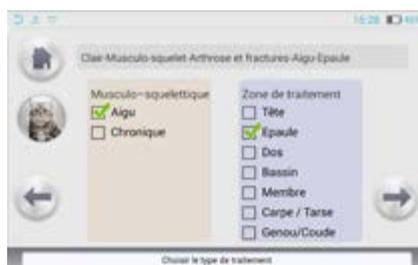

# Thérapie Laser

## ADAPTÉ AUX SOINS EN CLINIQUE ET SUR LE TERRAIN



### PORTABILITÉ MAXIMALE

#### ERGONOMIE :

- Fonctionnement sur batterie grande autonomie
- Silencieux
- Grand écran tactile 7"
- Compact et léger (2,2 kg)



#### SIMPLICITÉ :

- 3 longueurs d'onde (640, 910, 980 nm)
- Interface claire et intuitive
- Mode Power Pulse jusqu'à 16W
- 3 embouts pour toutes les applications cliniques
- Gestion historique patients

Batterie  
longue  
durée

Diodes  
garanties  
10 ans



Soins  
Bien-être



## DÉTARTRAGE

### Détartreur D7

Détartreur à ultrasons avec réservoir d'eau 400 ml et pièce à main lumière LED

- Applications : détartrage, parodontie et endodontie
- 7 pointes différentes incluses
- Pièce à main autoclavable



7 pointes différentes pour de multiples applications



### Détartreur Vet200 Plus

Détartreur Piézo-électrique portable et performant, parfaitement adapté à l'usage vétérinaire

- 5 pointes en céramique piézo incluses
- Contrôle automatique de la fréquence
- Pression de 0,1 à 0,5 bar
- Pièce à main compatible EMS



Soins  
Bien-être

### Micromoteur Polisseur Strong



Conçu pour le polissage, il permet également d'effectuer des petits travaux de dentisterie (NAC ou dents dévitalisées)

- Vitesse réglable de 0 à 35 000 tours / minute
- Contre-angle 1:1 inclus
- Commande manuelle et pédale

## POMPE À PERFUSION

### ManoPump iV1

#### Pratique, ergonomique, efficace :

- Légère (1,45 kg) et peu encombrante
- Batterie performante (jusqu'à 10 h d'autonomie)
- Grand écran tactile 4,3'' (10,75 cm) pour un affichage clair des paramètres notamment du temps de perfusion restant
- Multiples possibilités de réglages (volume global à perfuser, débit souhaité, durée totale de la perfusion...)
- Haute sensibilité des réglages (bulles et pression d'occlusion)
- Compatible transfusion
- Compatible tout set de perfusion (étalonnée avec les sets Génia)



SUPPORTS  
CAGE ET PIED  
À PERFUSION  
INCLUS



## POUSSE SERINGUE

### ManoPump SP1

- Détection automatique de la taille de la seringue (5, 10, 20, 30, et 50/60 ml)
- Grand écran tactile 4,3'' (10,75 cm) pour un affichage clair des paramètres
- 3 modes de fonctionnement : ml/h (temps, débit), masse corporelle, micro.

## RÉCHAUFFEUR DE PERFUSION

### Vet Temp2

- Réchauffe les liquides perfusés en continu
- Compatible avec les sets standards pour petits animaux
- Contrôle la température pour une sécurité optimale



Soins  
Bien-être

## MATELAS CHAUFFANT Carbon Tech V1

**100% Efficacité, 100% Sécurité !**

- Tissu carbone haute densité
- Spécialement conçu pour diffuser la chaleur de façon homogène
- Structure souple et confortable
- Température de régulation atteinte en moins de 5 minutes
- Température de contact basse apportant à l'animal toute l'énergie nécessaire à son réchauffement.



Deux modèles disponibles :

Modèle cage : 52 x 62 cm (+/- 1 cm)

Puissance : 25W

Modèle table : 52 x 112 cm (+/- 1 cm)

Puissance : 50W

## MATELAS CHAUFFANT Carbon Tech V2

**GARANTIE  
5 ANS  
CONTRE  
GRIFFURES  
ET MORSURES**

**Pour une prise en charge  
toujours plus sûre et plus rapide**



Modèle cage 52x62 cm  
(Puissance : 25W)



Modèle table 52x112 cm  
(Puissance : 50W)

### Les + du CarbonTech V2

- Sonde intégrée avec capteur de température
- Limiteur de température intégré (42°C)
- 3 niveaux de puissance (50%, 80% et 100%) pour s'adapter encore plus aux conditions et aux besoins de l'animal
- Coupure automatique après 12 heures de chauffe
- Câble d'alimentation déconnectable



Soins  
Bien-être



# Aménagement équipement





## NETTOYEURS À ULTRASONS

### Ultra-C 6

6 LITRES

- **Puissance ultrasons : 180 Watts**
- **Dimensions intérieures Lxlxh : 300x150x150 mm**
- **Dimensions extérieures Lxlxh : 325x180x305 mm**
- Cuve : inox
- Puissance de chauffage : 300 Watts
- Minuterie mécanique de 0 à 30 min, arrêt automatique des ultrasons
- Éléments fournis avec la cuve :  
Panier inox maille 10mm + couvercle inox
- Vanne de vidange pour vider proprement la cuve



Option tuyau d'évacuation



Le coût d'un nettoyage à ultrasons est très vite rentabilisé. Sa faible utilisation de détergent représente entre 2 et 5% du volume d'eau.

### Ultra-C 15

15 LITRES

- **Puissance ultrasons : 360 Watts**
- **Dimensions intérieures Lxlxh : 300x300x150 mm**
- **Dimensions extérieures Lxlxh : 360x330x330 mm**
- Cuve inox
- Puissance de chauffage : 400 Watts
- Minuterie mécanique de 0 à 20 min, arrêt automatique des ultrasons
- Éléments fournis avec la cuve :  
Panier inox maille 10mm + couvercle inox
- Vanne de vidange pour vider proprement la cuve



# Stérilisation



## AUTOCLAVES CLASSE B EcoSteam FBS et FBL



Petits par la taille, grands par l'efficacité grâce à des cycles de stérilisation 2 fois plus courts !

Modèles	Dimensions Poids	Nbre max. de sachets	Volume de la cuve	Durée des cycles
<b>EcoSteam FBS</b>	<b>25x15x56 cm</b> <b>15 kg</b>	<b>8</b>	<b>2,7 l</b>	<b>De 7 à 30 min</b>
<b>EcoSteam FBL</b>	<b>27x20x56 cm</b> <b>20 kg</b>	<b>16</b>	<b>5,3 l</b>	<b>De 9 à 43 min</b>

### Économique et Écologique

**1 LITRE D'EAU**  
pour **1000 CYCLES**  
soit une **ÉCONOMIE**  
de **50 BIDONS**  
de **5 L !**

Grâce au filtre magique conçu pour recycler l'eau déminéralisée, plus besoin de réalimenter en permanence votre autoclave !



**PLUG  
AND  
PLAY**

Installation

rapide et intuitive :

1. Branchez l'appareil
2. Choisissez le cycle
3. Appuyez sur «START»



**Aménagement  
Équipement**



## LAMPE GERMICIDE UV-C

### Aseptor

Conçue pour améliorer la qualité microbiologique de l'air dans votre clinique

**NEW!**




#### Pourquoi utiliser la lampe Aseptor ?

- ▶ Pour son efficacité redoutable pour l'élimination d'agents pathogènes aéroportés
- ▶ Pour son utilisation totalement dépourvue de risques pour l'homme et l'animal
- ▶ Pour sa simplicité d'utilisation et son très faible coût de maintenance

Élimine près de  
**97%**  
des micro-organismes  
présents dans l'air

Aménagement  
Équipement

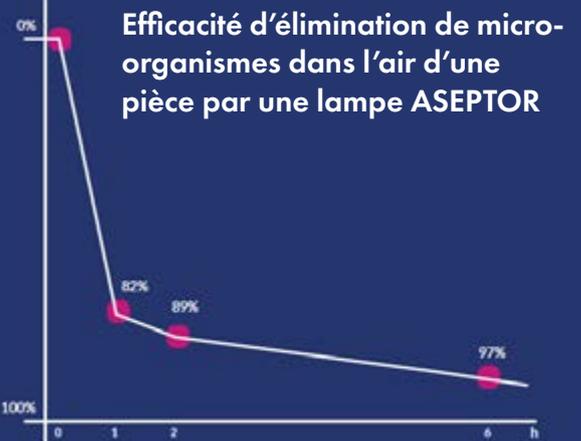

Tiré des recherches sur l'efficacité des lampes ASEPTOR menées par le Pr. Waclaw Dabrowski de l'Institut National d'Agriculture et de Biotechnologies Alimentaires (Pologne)

2 modèles :

- ASEPTOR 236 : efficace jusqu'à 35m<sup>2</sup> (90m<sup>3</sup>)
- ASEPTOR 255 : efficace jusqu'à 60m<sup>2</sup> (150m<sup>3</sup>)

# Éclairage

## LAMPES D'EXAMEN

### Alfa Flex

- Diamètre de la lampe : 8,6 cm
- Diamètre du champ lumineux à 0,50 m : 14 cm
- Température : 4 500°K
- Indice de rendu des couleurs : 95 Ra
- Système de fixation : mural, table ou pied sur roulettes



▼  
70 000 Lux  
à 0,5 m

▼  
35 000 Lux  
à 1 m



- Diamètre de la lampe : 19,5 cm
- Diamètre du champ lumineux : 28 cm
- Température : 4000°K et 4500°K
- Indice de rendu des couleurs : 95 Ra
- Intensité lumineuse réglable en 6 niveaux
- Modèles : mobile, plafonnier ou mural

### VetLight 30

## LAMPES CHIRURGICALES

### VetLight 80

- Diamètre de la lampe : 30 cm
- Diamètre du champ lumineux : 11 à 33 cm
- Température : 4 500°K et 5 000°K
- Indice de rendu des couleurs : 94 Ra
- Nombre de LEDs : 28
- Modèles : mobile, plafonnier, double plafonnier, mural
- Livrée avec 2 poignées stérilisables

▼  
120 000 Lux  
à 1 m



▼  
160 000 Lux  
à 1 m



### VetLight Golden

- Diamètre de la lampe : 52 cm
- Diamètre du champ lumineux de 11 à 35 cm
- Température réglable de 4 000°K à 4 600°K
- Indice de rendu des couleurs : 95 Ra
- Nombre de LEDs : 81
- Modèles : mobile, plafonnier, double plafonnier, mural
- Livrée avec 2 poignées stérilisables

Aménagement  
Équipement

## TABLES DE CHIRURGIE ET TABLES DE CONSULTATION

### Table de chirurgie



COMMANDES

- MONTÉE / DESCENTE
- PROCLIVE / DÉCLIVE

- Plateau creux inox 304L facile d'entretien
- Vérin électrique silencieux et sans secousse

### Assistant muet



- Plateau à bords relevés inox 304L facile d'entretien
- Écartement pieds réglable de 47 à 77 cm

### Table colonne



- Colonne de levage électrique silencieuse et sans secousse
- Tiroir de rangement

### Table élévatrice



- Mécanisme en croix pour une stabilité maximale
- Batterie rechargeable (version mobile)



### Table gain de place

- 3 tiroirs et 1 grand caisson central à ouverture aisée par pression
- Caisson muni de 2 bacs pour un tri sélectif des déchets



## CHOISISSEZ VOTRE TABLE EN UN CLIN D'OEIL !

**NEW!**

	Chirurgie		Consultation		
	Assistant muet	Table de chirurgie	Table colonne de consultation	Table élévatrice de consultation	Table gain de place
Hauteur minimale	70 cm	70 cm	70 cm	20 cm / 24 cm*	91 cm
Hauteur maximale	115 cm	130 cm	110 cm	110 cm / 114 cm*	100 cm
Charge maximale	20 kg	100 kg	100 kg	80 kg	100 kg
Dimensions plateau	60 x 40 cm	130 x 63 cm	130 x 63 cm	120 x 63 cm	130 x 63 cm
Pédale de commande électrique	-	✓	✓	✓	-
Plateau inox	✓	✓	✓	✓	-
Plateau HPL 4 coloris au choix	✓	-	✓	✓	✓
Version Fixe	-	✓	✓	✓	✓
Version Mobile (4 roues dont 2 bloquantes)	✓	-	-	✓	✓
Matériel livré monté	-	✓	✓	✓	✓
Option pesée	-	-	✓	✓**	-
Garantie	Structure inox garantie 5 ans Parties électriques garanties 2 ans				

\*Version fixe : 20 cm - 110 cm  
Version mobile : 24 cm - 114 cm

\*\* Disponible sur le modèle fixe uniquement

Plateau HPL résistant et facile d'entretien  
Les coloris :



Bleu gentiane



Blanc



Noir graphite



Vert d'eau



Aménagement  
Équipement



# VOUS ACCOMPAGNER VOUS CONSEILLER, VOUS INFORMER

## À VOTRE SERVICE

### WEBINAIRES

- Profitez de nos supports techniques et pédagogiques présentés par des vétérinaires spécialistes.
- ⇒ Abonnez-vous à nos réseaux sociaux pour rester informés !

### PRÉSENTATIONS PRODUITS

- Nous vous proposons des tutoriels en ligne simples et pratiques, afin de vous faciliter la prise en main et l'utilisation de nos équipements.
- ⇒ Abonnez-vous à notre chaîne YouTube !

### CONSEILS PRATIQUES

- Découvrez notre rubrique «Le saviez-vous ?» sur [www.manomedical.com](http://www.manomedical.com) pour profiter d'astuces et d'informations techniques.
- ⇒ Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir tous nos articles !

### SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

[www.manomedical.com/fr/](http://www.manomedical.com/fr/)



## BESOIN D'UNE SOLUTION DE FINANCEMENT ?

**MAD/** by  
Mano Médical

- MISE À DISPOSITION d'un matériel
- Garantie **TOTALE**
- **SANS** franchise
- Assistance à distance **ILLIMITÉE**
- **PRÊT** d'un matériel en cas d'immobilisation

UNE  
SOLUTION  
SIMPLE ET  
CLAIRE POUR  
VOUS  
ÉQUIPER

Contactez-nous pour une étude personnalisée au  
**02 96 85 86 76.**



# INDEX

Équipement	Page
Arthroscope	13
Aspirateur chirurgical	23
Assistant muet	48
Autoclave	45
Bistouri électrique	24
Bronchoscope	14
Caméra pour endoscopie rigide	13
Caméra pour microscope	30
Capnographe	34
Capteur plan canin	19
Capteur plan équin	18
Colonne d'endoscopie	14
Concentrateur d'oxygène	23
Cuve à ultrasons	44
Départreux	40
Détecteur d'apnée	23
Doppler	31
ECG	30
Échographe en clinique	10
Échographe portable	7
Endoscope portable	15
Endoscope rigide	13
Gastroscope	14
Générateur de rayons X	16
Lampe chirurgicale	47
Lampe d'examen	47
Lampe germicide	46
Laryngoscope	23
Laser thérapeutique	38
Logiciel de radiologie numérique	20
Matelas chauffant	42
Micro-moteur	40
Microscope binoculaire	29
Microscope trinoculaire	30
Moniteur de surveillance opératoire	34
Nettoyeur à ultrasons	44

Équipement	Page
Otoscope	13
Polisseur	40
Pompe à perfusion	41
Pousse seringue	41
Réchauffeur de perfusion	41
Rhinoscope	13
Table de chirurgie	48
Table de consultation	48
Table de radiologie	17
Tablette pour microscope	30
Tensiomètre	31
Thermofusion	25



www.manomedical.com



# Mano Médical

Medical equipment for veterinarians

Tel. +33 (0)2 96 85 86 76  
welcome@manomedical.com

15, rue du Noroît - ZA des Alleux  
22100 Taden  
France

