


POINTCARE V2

ANALYSEUR de biochimie



IONOGRAMME inclus

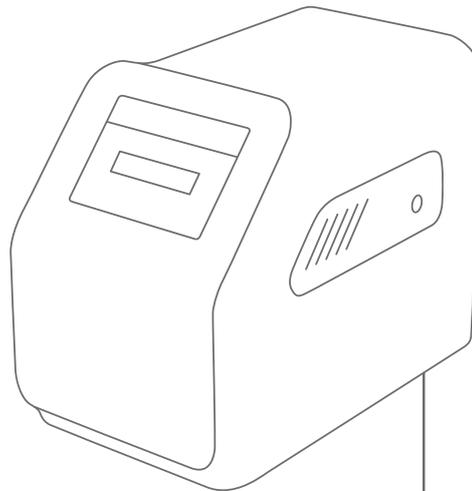

Mano
Médical

Medical equipment for veterinarians

Analyseur de biochimie



Simple d'utilisation :

- Analyse sur sang total - **3 étapes** :



Pipettage



Insertion du disque

Item Name	Result	Unit	Ranges
ALB	3.8	g/dL	4-4.4
TP	4.5	g/dL	5.4-8.1
GLO	0.7	g/dL	2.3-5.2
Ca2+	10.7	mg/dL	8.6-11.8
GLU	113	mg/dL	59-110
BUN	18.0	mg/dL	7-25
P	15.51	mg/dL	2.9-10.4
AMY	755	U/L	200-1200
CHOL	115	mg/dL	124-271
ALT	111	U/L	10-118

Affichage des résultats



Rapide

- Pointcare V2 réalise un **bilan complet** sur sang total en 10 minutes (centrifugation comprise).



Fiable

- L'étalonnage des réactifs est réalisé en usine et intégré dans le QR code du disque réactif.
- Un contrôle de qualité est intégré à l'appareil et s'effectue à chaque analyse.



Précis

- Pointcare V2 a fait l'objet de corrélation avec la méthode de référence en laboratoire (chimie liquide sur analyseur Roche).



Entretien, maintenance et téléservice

- Pointcare V2 ne nécessite **aucune maintenance**.
- Pointcare V2 bénéficie de mises à jour gratuites du logiciel que nous pouvons télécharger sur votre appareil à votre demande.



Connectique et partage des résultats

- Le PC livré avec Pointcare V2 dispose d'un logiciel de gestion des résultats, qui permet d'exporter ceux-ci en différents formats (PDF par exemple) pour ensuite les partager avec votre logiciel de gestion.

Analyseur de biochimie

Compact et léger

Un encombrement minimum pour des résultats optimums !



Poids : 2,5 kg



● Consommables :

L'utilisation de Pointcare V2 ne nécessite aucun consommable spécifique. (Pas de pipette, de tube pour centrifuger, de tube échantillon spécifiques...)

● Rentable :

Pointcare V2 est sans doute l'appareil le plus économique du marché. Contactez-nous pour une étude financière personnalisée. À l'achat ou en **Mise à Disposition** (programme **MAD**), Pointcare V2 vous permettra d'apporter le meilleur service à votre clientèle au moindre coût.

Pointcare v2 est éligible au programme

MAD / by Mano Médical

- Garantie **totale** sans franchise ni vétusté
- **Pas** d'investissement
- **Zéro** immobilisation
- Une gestion **optimale** de vos coûts par acte

Contactez-nous pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76**.



Analyseur de biochimie



Détails des bilans :

▶ Général (14 paramètres) :	ALT, CRE, GLU, TBIL, ALP, AMY, BUN, ALB, TP, GLOB*, Ca ²⁺ , PHOS, CHOL, CK
▶ Préanesthésique (6) :	ALT, CRE, GLU, ALP, BUN, TP
▶ Préanesthésique plus (9) :	ALT, CRE, GLU, ALP, BUN, TP, AST, CK, LDH
▶ Foie et rein (10) :	ALT, CRE, GLU, TBIL, BUN, ALB, TP, GLOB*, GGT, AST
▶ Foie (10) :	ALT, TBIL, DBIL, IBIL*, ALP, ALB, TP, GLOB*, GGT, AST
▶ Rein (6) :	CRE, BUN, ALB, Ca ²⁺ , PHOS, CO ₂
▶ Electrolytes (7) :	Ca ²⁺ , K ⁺ , Na ⁺ , CL ⁻ , CO ₂ , Mg ²⁺ , PHOS
▶ Équin (14) :	TP, ALB, TBIL, AST, GGT, ALP, CK, GLU, CRE, BUN, CO ₂ , Ca ²⁺ , K ⁺ , Na ⁺
▶ Grands animaux (bovins) (11) :	ALB, ALP, AST, BUN, Ca ²⁺ , CK, GGT, GLP*, Mg ²⁺ , PHOS, TP
▶ Bilan 3 tests :	Faites votre choix parmi une sélection de paramètres ! CRE, BUN, PHOS, ALB, TP, Ca ²⁺ , GLU, AMY, CHOL, ALT, TBIL, ALP, CK

* Paramètres calculés

Exemple : CRE, BUN et PHOS (Suivi Rénal)



Caractéristiques techniques :

Volume d'échantillon :	environ 100 µl
Espèces :	chien, chat, cheval + paramètres libres
Capacité de stockage :	plus de 50 000 données patients
Calibration :	automatique grâce au QR Code fourni avec chaque disque réactif
Dimensions et poids :	17,5 (H)x 21 (P) x 12,5 (L) cm - 2,5 kg
Alimentation secteur :	100-240 volts , 50-60 Hz
Echantillon :	sang total, plasma ou sérum
Durée du test :	10 minutes (centrifugation comprise)
Interface :	écran LCD couleur tactile 3,5''
Lecture code-barre :	lecteur externe inclus
Connectique :	PC portable fourni avec le logiciel de gestion et de partage des données

