

# Apogee 1000V Lite

RURALE, CANINE, ÉQUINE

POLYVALENT  
PERFORMANT  
COMPACT



# Performant pour une image de qualité



## • Fusion Tissue Harmonic (Fusion THI)

Fusion en temps réel des informations provenant de différentes bandes de fréquences. Fusion THI met en œuvre la transmission et la réception à large bande des ondes harmoniques.

## • Nanoview


Système qui visualise les minuscules lésions en distinguant clairement les tissus et les contours.

## • X-Beam

Cette technologie permet d'atténuer les artefacts d'écho et d'améliorer la résolution spatiale.

## • Macro Fidelity (MFI)

En réduisant la distorsion du signal et en éliminant les bruits indésirables, le MFI rend des images de qualité supérieure avec une résolution exceptionnelle, un contraste élevé et une meilleure pénétration.

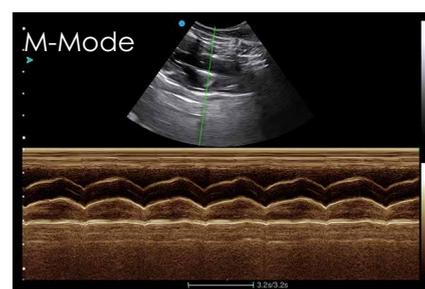

## Auto-Fit

La fonction d'optimisation à bouton unique permet non seulement de régler la TGC et le gain B, mais aussi la PRF et le gain PW de la ligne de base pour obtenir la meilleure image 2D et le meilleur spectre PW.

 **Mano Médical**  
Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

[contact@manomedical.com](mailto:contact@manomedical.com)  
[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)

# Compact et polyvalent




## • Ergonomie

**Panneau de commande plat**  
résistant aux éclaboussures

**Set complet de touches**  
de fonctions directes

**Écran 15" haute résolution**  
inclinable de 125°

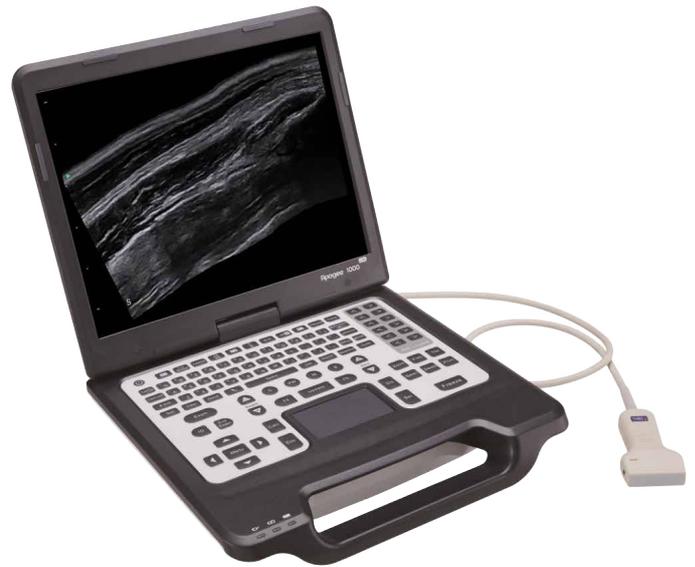

## • Mobilité

**Léger - 5 kg seulement !**

Design compact au format PC portable

**Batterie amovible**

Chargeur de voiture inclus

**Sac de transport à roulettes**

pour une plus grande mobilité





## MODES D'IMAGERIE

- ▶ Modes B, 2B et 4B
- ▶ Modes M et B/M
- ▶ Modes B et PW
- ▶ Modes B et E



## SONDES

- ▶ Micro-convexe R17,5  
4,5 - 7,5 MHz
- ▶ Linéaire 38 mm  
5 - 12 MHz



- ▶ Endo-linéaire 65 mm  
4 - 7 MHz



- ▶ Convexe R60  
2 - 5 MHz



## DIMENSIONS

- ▶ Taille: 35 x 32 x 9 cm
- ▶ Poids : 5 kg (avec batterie)

## APPLICATIONS AVANCÉES

- ▶ Auto-Fit : automatisation avancée
- ▶ Nanoview : réduction du speckle
- ▶ Imagerie trapézoïdale
- ▶ Personnalisation du type d'examen
- ▶ MFI (Inversion THI)
- ▶ XBeam : Imagerie compound
- ▶ Auto IMT
- ▶ Panoscope : imagerie panoramique
- ▶ Smarchive

## INTERFACE

- ▶ Écran haute résolution 15" inclinable de 125°
- ▶ Écran anti-reflets
- ▶ Résolution : 1024 x 768
- ▶ 6 segments TGC
- ▶ Batterie Lithium amovible
- ▶ Autonomie : jusqu'à 1h30 de fonctionnement continu
- ▶ Chargeur de voiture inclus
- ▶ 1 connecteur de sonde
- ▶ Disque dur de 500 Go
- ▶ 2 ports USB

**MAD** / by  
Mano Médical

- Garantie TOTALE
- SANS franchise ni vetusté
- PRÊT d'un matériel en cas d'immobilisation
- Assistance à distance ILLIMITÉE

Contactez-nous pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76**



**Mano  
Médical**

Medical equipment for veterinarians

22, rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvally - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com  
www.manomedical.com