

Apogee 1000V Lite

RURALE, CANINE, ÉQUINE

POLYVALENT
PERFORMANT
COMPACT



Performant pour une image de qualité

- **Fusion Tissue Harmonic (Fusion THI)**

Fusion en temps réel des informations provenant de différentes bandes de fréquences. Fusion THI met en œuvre la transmission et la réception à large bande des ondes harmoniques.

- **Nanoview**


Système qui visualise les minuscules lésions en distinguant clairement les tissus et les contours.

- **X-Beam**

Cette technologie permet d'atténuer les artefacts d'écho et d'améliorer la résolution spatiale.

- **Macro Fidelity (MFI)**

En réduisant la distorsion du signal et en éliminant les bruits indésirables, le MFI rend des images de qualité supérieure avec une résolution exceptionnelle, un contraste élevé et une meilleure pénétration.

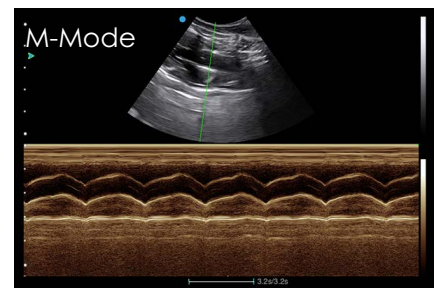

Auto-Fit

La fonction d'optimisation à bouton unique permet non seulement de régler la TGC et le gain B, mais aussi la PRF et le gain PW de la ligne de base pour obtenir la meilleure image 2D et le meilleur spectre PW.



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com

Compact et polyvalent



• Ergonomie

Panneau de commande plat
résistant aux éclaboussures

Set complet de touches
de fonctions directes

Écran 15" haute résolution
inclinable de 125°



• Mobilité

Léger - 5 kg seulement !

Design compact au format PC portable

Batterie amovible

Chargeur de voiture inclus

Sac de transport à roulettes

pour une plus grande mobilité





MODES D'IMAGERIE

- ▶ Modes B, 2B et 4B
- ▶ Modes M et B/M
- ▶ Modes B et PW
- ▶ Modes B et E



SONDES

- ▶ Micro-convexe R17,5
4,5 - 7,5 MHz
- ▶ Linéaire 38 mm
5 - 12 MHz



- ▶ Endo-linéaire longue
65 mm | 4 - 7 MHz
- ▶ Endo-linéaire courte
50 mm | 5-12 MHz



- ▶ Convexe R60
2 - 5 MHz



APPLICATIONS AVANCÉES

- ▶ Auto-Fit : automatisation avancée
- ▶ Nanoview : réduction du speckle
- ▶ Imagerie trapézoïdale
- ▶ Personnalisation du type d'examen
- ▶ MFI (Inversion THI)
- ▶ XBeam : Imagerie compound
- ▶ Auto IMT
- ▶ Panoscope : imagerie panoramique
- ▶ Smarchive

INTERFACE

- ▶ Écran haute résolution 15" inclinable de 125°
- ▶ Écran anti-reflets
- ▶ Résolution : 1024 x 768
- ▶ 6 segments TGC
- ▶ Batterie Lithium amovible
- ▶ Autonomie : jusqu'à 1h30 de fonctionnement continu
- ▶ Chargeur de voiture inclus
- ▶ 1 connecteur de sonde
- ▶ Disque dur de 500 Go
- ▶ 2 ports USB

DIMENSIONS

- ▶ Taille: 35 x 32 x 9 cm
- ▶ Poids : 5 kg (avec batterie)

MAD / by
Mano Médical

- Garantie TOTALE
- SANS franchise ni vetusté
- PRÊT d'un matériel en cas d'immobilisation
- Assistance à distance ILLIMITÉE

Contactez-nous pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76**



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com