

DR IMAGING 300




Radiologie numérique directe à capteur plan multi CCD

Plus efficace • Plus simple • Plus rapide
Plus économique !

Passez au numérique et gagnez en efficacité avec le système **DR IMAGING 300**, un système de radiologie numérique directe économique et rentable.

C'est simple, en moins de 4 secondes, vous obtenez des clichés haute résolution ! Le logiciel spécifique vétérinaire vous aide à économiser encore plus de temps...

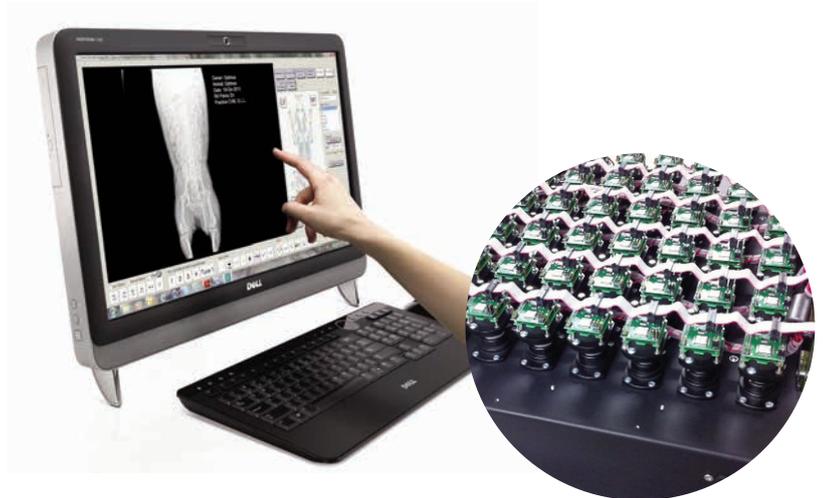

Capteur plan multi CCD

Détection des rayons X automatique !



Technologie capteur plan	Capteur plan multi CCD (45 capteurs)
Résolution	8 px / mm
Dimensions détecteur	320 x 423 mm
Conversion A/D	14 bits (16 383)
Temps d'acquisition	< 4 sec
Détection des rayons X	Automatique
Connexion	USB
Consommation	65 W (max.)
Dim / Poids	492 x 430 x 170 mm / 18 kg


**UN ESSAI CHEZ VOUS ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 85 86 76 !**



www.manomedical.com

Logiciel PACS - DR IMAGING 300

Bien plus qu'un simple logiciel d'acquisition, le logiciel PACS inclus dans le système **DR IMAGING 300** a été spécialement conçu pour les vétérinaires et propose de nombreuses fonctions :

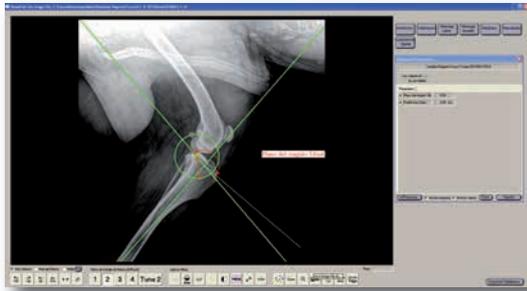


TPLO



Prévisualisation



Norberg

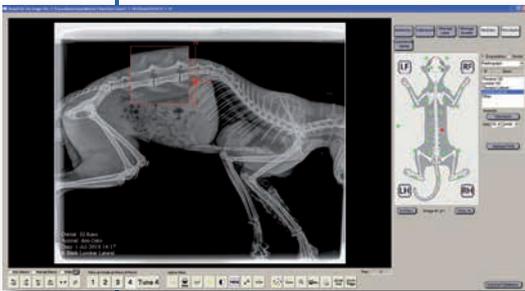

Impression taille réelle

Base de données avec prévisualisation	<input checked="" type="checkbox"/>
Recherche rapide multi-critères	<input checked="" type="checkbox"/>
Fiche signalétique patients vétérinaire complète	<input checked="" type="checkbox"/>
Gravure sur CD avec visionneuse DICOM	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportation d'images multi-formats (.dcm, .jpg, .tif, .png, .psd)	<input checked="" type="checkbox"/>
Importation tous types d'images pour rapport patient	<input checked="" type="checkbox"/>
Partage avec les salles de consultation (type PACS)	<input checked="" type="checkbox"/>
Affichage plein écran, taille réelle (orthopédie), comparatifs	<input checked="" type="checkbox"/>
Mesures spécifiques vétérinaires assistées	<input checked="" type="checkbox"/>
Impression papier en taille réelle (orthopédie)	<input checked="" type="checkbox"/>
Annotations multiples, annotations vocales	<input checked="" type="checkbox"/>
Editions de rapports patients	<input checked="" type="checkbox"/>
Transfert sur iPhone ou iPad	<input checked="" type="checkbox"/>



Plein écran



Rapport Cardio Vertébral

